

BioReFeel[®]

Dermal bio-restrukturierendes Produkt

HA 33 mg/ml - L•M•H



Alles, was wir tun, zielt darauf ab, das Wohlbefinden und die Schönheit der Menschen zu verbessern.

Unterschiedliche Altersgruppen,
unterschiedliche Bedürfnisse, eine Lösung:

BioReFeel®

DER REGENERATIONSPROZESS

Hyaluron-
säure ⁽¹⁾

Bernstein-
säure ^(2;4)

Amino-
säuren ⁽³⁾

Präjuvenation
Revitalisierung
Restrukturierung

NTS
TECHNOLOGY




NTS
TECHNOLOGY

Technologie ohne thermische Belastung


Das innovative, patentierte Vakuumsterilisationsverfahren, das ausschließlich von CMed Aesthetics eingesetzt wird. Dieses einzigartige Vakuumsterilisationsverfahren schützt die Wirkstoffe vor thermischer Belastung und verhindert so Hydrolyse, Oxidation und Fragmentierung, was zu hochwirksamen Inhaltsstoffen und Endprodukten von höchster Qualität führt.

LICHTMIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG

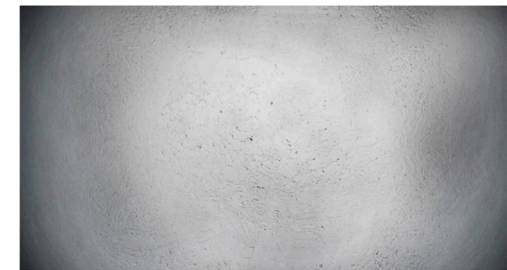

BioReFeel®


Der Vitalitätstest zeigt eine Zellproliferation
auf der gesamten Hydrogeloberfläche.

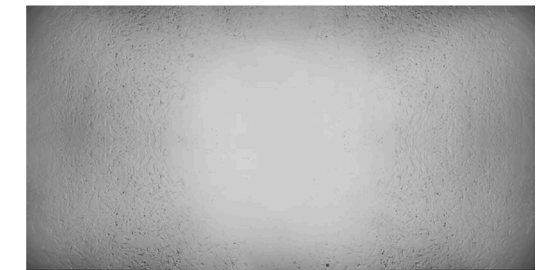

REFERENZ


Der Vitalitätstest zeigt Zellen, die über
die glatte Hydrogeloberfläche gleiten.

RASTERELEKTRONENMIKROSKOPISCHE ANALYSE

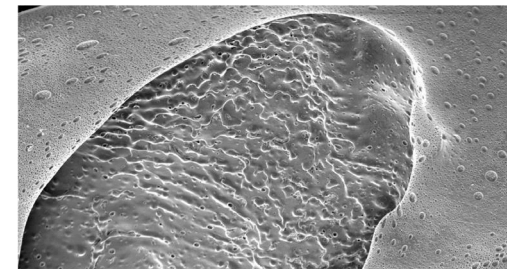

BioReFeel® x 1600

Detaillierte Analyse: raue innere Oberfläche.
Vitalitätstest bestätigt.

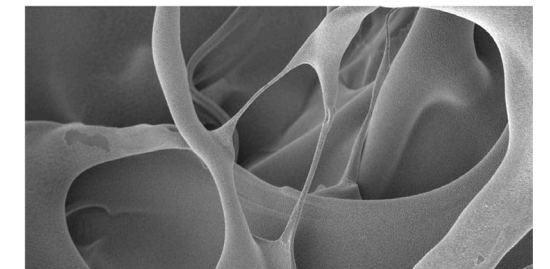


REFERENZ Autoklav x 1600

Detaillierte Analyse: glatte innere Oberfläche.
Vitalitätstest bestätigt.



1 Spritze = 2,4 ml

BioReFeel® INTRADERMALE INJEKTION

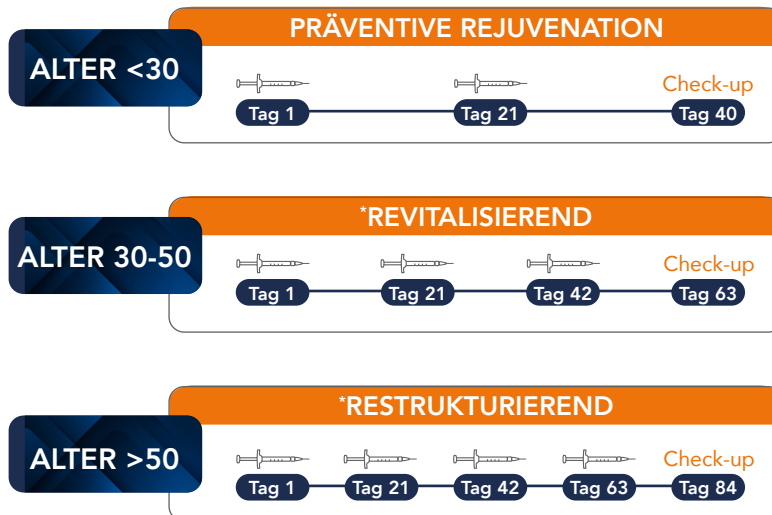

STANDARD-INJEKTIONSPROTOKOLL:


TAG 1 | 1. Injektion → TAG 21 | 2. Injektion → TAG 40 | Check-up

FORMULIERUNG:

- HA⁽¹⁾ - 3MW - H (2,0 m³/kg) - M (1,2 m³/kg) - L (0,6 m³/kg)
- Bernsteinsäure^(2,4) (1,3%)
- Aminosäuren⁽³⁾: - Strukturelle Aminosäuren des Kollagens (Glycin, Prolin und Hydroxyprolin)
- Funktionelle Aminosäuren (Lysin, Leucin, Isoleucin, Valin, Threonin, Phenylalanin, Methionin, Glutaminsäure und Arginin)

NTS
TECHNOLOGY

(1) The Journal of clinical and aesthetic dermatology. The effects of a non-cross-linked Hyaluronic Acid gel on the aging signs of the face versus normal saline: A randomized, double-blind, placebo-controlled, split-faced study. L. Duteil, C. Quelle-Roussel, Hanane Issa - feb 2023. (2) Biochemistry & biophysical reports. Effects of succinic acid on dermal fibroblasts during cultivation under extremely hypoxic conditions. T. Papuriona, O. Barsukov, O. Zabuga, D. Krasnenkov, E. Denis - Jan 2023. (3) Journal of Cosmetic Dermatology. The role of hyaluronic acid and amino acid against the aging of the human skin: A clinical and histological study. A. Scarano, A. Starbati, R. Amore - 22 oct 2020. (4) MOLECULAR SCIENCE 2025 - Hyaluronic and Succinic Acid: New Biostimulating Combination to Counteract Dermal and Subcutaneous Aging. Alfredo Martinez-Gutierrez 1, and Mari Carmen González 3, Helena Cami 1, Teresa Noya 1, Susana Gómez-Escalante 2, Ana Miró Lloas 2.

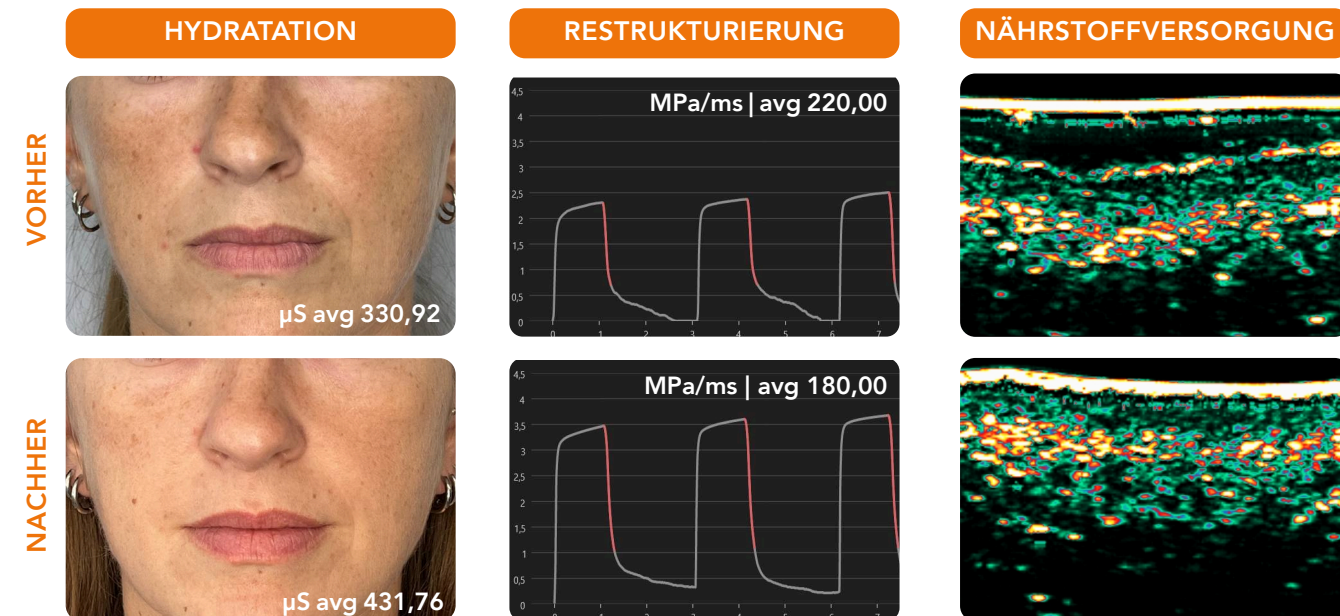

STANDARD INJEKTIONS- PROTOKOLL


● 0,1 ml
○ 0,2 ml
Je Injektionspunkt



TAG 1 | 1. Injektion

TAG 21 | 2. Injektion

TAG 40 | Check-up

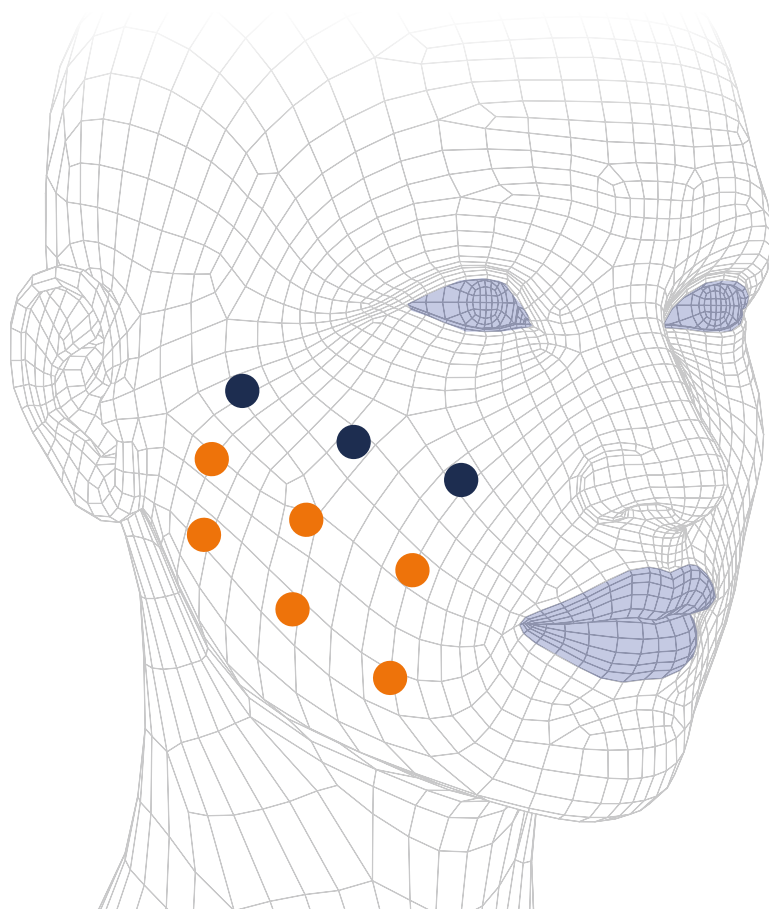


ERWEITERTE INJEKTIONS- PROTOKOLLE

DÉKOLLETÉ Protokoll




● 0,1 ml
● 0,2 ml
je Injektionspunkt

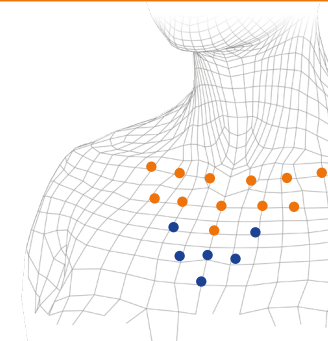

HALS Protokoll




● 0,1 ml
je Injektionspunkt

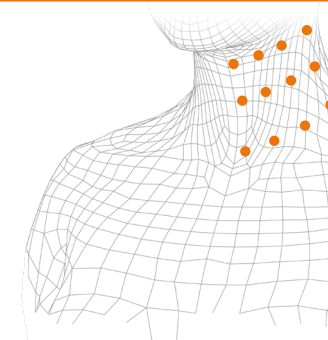

GLP-1 Protokoll



● 0,4 ml
je Pfeil

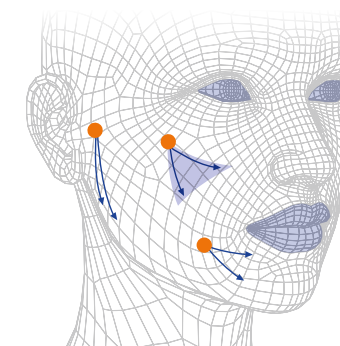



E-Mail: web@cmedaesthetics.com
www.cmedaesthetics.com

MorySkin.

Deutscher Exklusivdistributor
E-Mail: support@moryskin.com
Telefon: +49 511 97818142
www.moryskin.com



INFORMATIONEN AUSSCHLIESSLICH FÜR
MEDIZINISCHES FACHPERSONAL | BRP/PROENR1